


## Brutschrank Im IF750mplus

Der Brutschrank Im ist ein  
Medizinprodukt der Klasse I.



Die Heizung dieses Brutschranks ist auf forcierte Luftumwälzung optimal abgestimmt, daher kann der Lüfter auch komplett abgeschaltet werden und kostbares Beschickungsgut für Forschung, Pharmazie, Medizin und Lebensmittelchemie wird besonders schonend erwärmt. Auf dieser Seite finden Sie zu unserem Inkubator alle wesentlichen technischen Daten. Für weitere Informationen steht Ihnen unser Vertrieb gerne zur Verfügung. Sollten Sie eine individuelle Sonderlösung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Technikspezialisten unter [sales@memmert.com](mailto:sales@memmert.com).

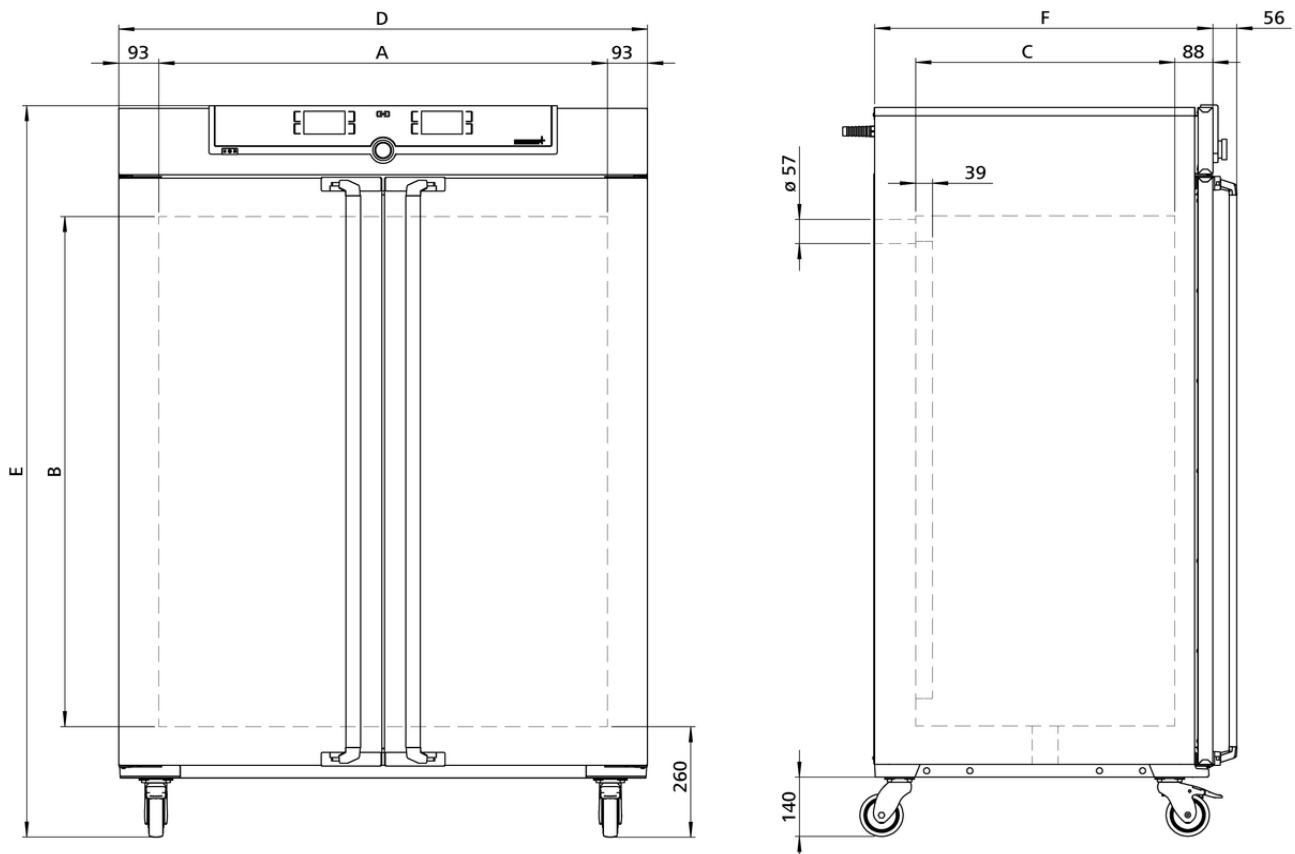

## Temperatur

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Einstelltemperaturbereich</b>      | +20 bis +80 °C   |
| <b>Arbeitstemperaturbereich</b>       | Mindestens 10°C über Raumtemperatur bis + 80°C   |
| <b>Einstellgenauigkeit Temperatur</b> | 0,1 °C   |
| <b>Temperatursensor</b>               | 2 Pt100-Sensoren DIN-Klasse A in 4-Leiter- Messung für wechselseitige Überwachung und Funktionsübernahme im Fehlerfall |

## Regelungstechnik

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>ControlCOCKPIT</b>         | TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbgrafikdisplays.          |
| <b>Spracheinstellung</b>      | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch   |
| <b>Timer</b>                  | Digitale Rückwärtsuhr mit Zielzeitangabe, einstellbar von 1 Min bis 99 Tage  |
| <b>Funktion HeatBALANCE</b>   | Anpassung der Heizleistungsverteilung zwischen der oberen und unteren Heizgruppe von -50 % bis +50 %                               |
| <b>Funktion SetpointWAIT</b>  | Prozesszeit startet erst bei Erreichen der Solltemperatur  |
| <b>Kalibrieren</b>            | drei frei wählbare Temperaturwerte   |
| <b>einstellbare Parameter</b> | Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Drehzahl Umluftmotor, Abluftklappenstellung, Programmlaufzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit |
| <b>Sterilisation</b>          | Fest installiertes Sterilisationsprogramm (4h/160°C) zur Innenraumsterilisation, nicht zur Sterilisation von Beschickungsgut       |

## Lüftung

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Luftturbine</b> | elektronisch regelbar, einstellbar in 10 %-Schritten, geräuscharm, segmentspezifisch |
| <b>Frischluf</b>   | durch elektronisch einstellbare Abluftklappe Beimengung vorgewärmter Frischluft      |
| <b>Abluft</b>      | Abluftstutzen mit Drosselklappe, elektronisch regelbar                               |

## Kommunikation

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Protokollierung</b> | Speicherung des Programmablaufs bei Stromausfall  |
| <b>Programmierung</b>  | Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port mit Hilfe der Software AtmoCONTROL |

## Sicherheit

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Temperaturüberwachung</b> | mechanischer Temperaturbegrenzer TB Schutzklasse 1 (DIN 12880) zur Heizungsabschaltung ca. 20°C über der max. Schranktemperatur  |
| <b>Temperaturüberwachung</b> | Temperaturwählwächter (TWW), Schutzklasse 3.1 oder Temperaturwählbegrenzer (TWB), Schutzklasse 2, wählbar am Display   |
| <b>AutoSAFETY</b>            | Zusätzlich integrierte Über- und Unter-Temperaturüberwachung "ASF", die automatisch dem Sollwert im frei wählbaren Abstand folgt, Alarm bei Über- oder Unterschreiten, Heizungsabschaltung bei Überschreiten |
| <b>Selbstdiagnosesystem</b>  | zur Fehlerfindung  |
| <b>Alarm</b>                 | optisch und akustisch  |

## Standardlieferumfang

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Einschübe</b>                | 2 Edelstahl-Gitterrost(e), electropoliert  |
| <b>Werkskalibrierzertifikat</b> | inkl. Werkskalibrierzertifikat bei +37°C   |
| <b>Tür</b>                      | innere Glastüren   |
| <b>Tür</b>                      | vollisolierte Edelstahltüren mit 2-Punkt-Verriegelung (Kompressions-Türverschuß) |

## Edelstahlinnenraum

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Abmessungen</b>                 | $B_{(A)} \times H_{(B)} \times T_{(C)}$ : 1040 x 1200 x 600 mm (T abzüglich 39 mm für Lüfter)         |
| <b>Innenraum</b>                   | pflegeleicht, durch Tiefziehverrippung versteift, mit geschützt integrierter 4-Seiten-Rundumbeheizung |
| <b>Volumen</b>                     | 749 l   |
| <b>Max. Anzahl der Einschübe</b>   | 14  |
| <b>Max. Belastung pro Gerät</b>    | 300 kg  |
| <b>Max. Belastung pro Einschub</b> | 30 kg   |

## Strukturedelstahlgehäuse

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Abmessungen</b> | $B_{(D)} \times H_{(E)} \times T_{(F)}$ : 1224 x 1720 x 784 mm (T +56mm Türgriff) |
| <b>Aufstellung</b> | fahr-und arretierbar, auf Rollen  |
| <b>Gehäuse</b>     | vollverzinkte Stahlblechrückwand  |

## Elektrische Daten

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Spannung</b>          | 230 V, 50/60 Hz |
| <b>Leistungsaufnahme</b> | ca. 2000 W      |
| <b>Spannung</b>          | 115 V, 50/60 Hz |
| <b>Leistungsaufnahme</b> | ca. 1800 W      |

## Umgebungsbedingungen

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Aufstellung</b>            | Der Abstand zwischen Wand und Geräterückwand muss mindestens 15 cm betragen. Der Abstand zur Decke darf 20 cm und der seitliche Abstand zur Wand oder zu einem benachbarten Gerät 5 cm nicht unterschreiten. |
| <b>Aufstellhöhe</b>           | max. 2000 m über NN  |
| <b>Umgebungstemperatur</b>    | +5 °C bis +40 °C   |
| <b>Luftfeuchtigkeit rh</b>    | max. 80 % nicht kondensierend  |
| <b>Überspannungskategorie</b> | II   |
| <b>Verschmutzungsgrad</b>     | 2  |

## Verpackungs-/Versanddaten

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Transportinformation</b>     | Die Geräte müssen in stehendem Zustand transportiert werden! |
| <b>Statistische Warennummer</b> | 8419 8998  |
| <b>Ursprungsland</b>            | Bundesrepublik Deutschland                                   |
| <b>WEEE-Reg.-Nr.</b>            | DE 66812464  |
| <b>Abmessungen inkl. Karton</b> | B x H x T: 1330 x 1910 x 1050 mm                             |
| <b>Nettogewicht</b>             | ca. 217 kg   |
| <b>Bruttogewicht Karton</b>     | ca. 288 kg   |

**Standardgeräte sind sicherheitsgeprüft und tragen die Zeichen:**

